



VK-Reader 安装说明


请确保需要安装的软件的电脑可以访问互联网。否则安装将会失败。

安装

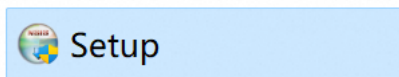


1. 双击 Setup
弹出权限提示，请选择“是”

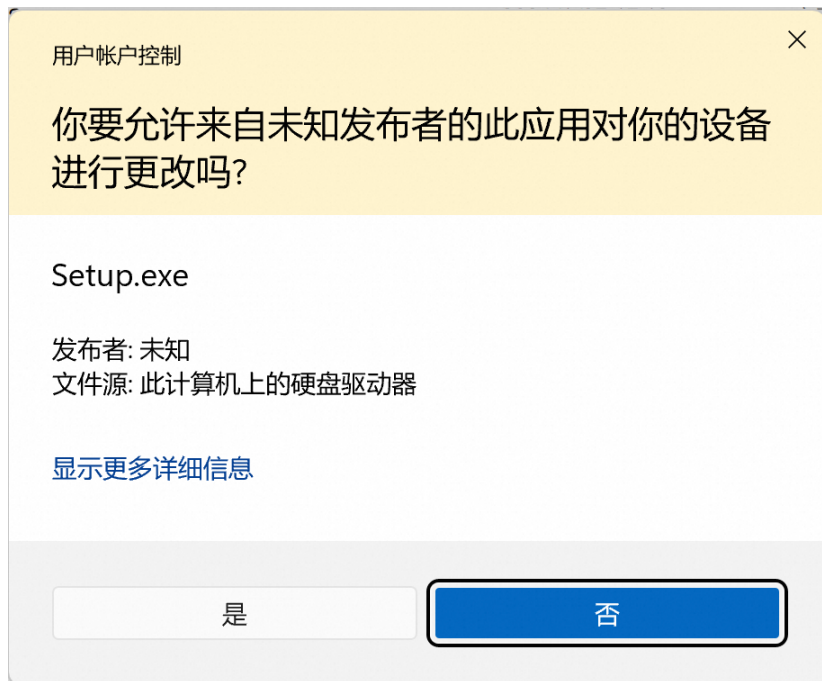

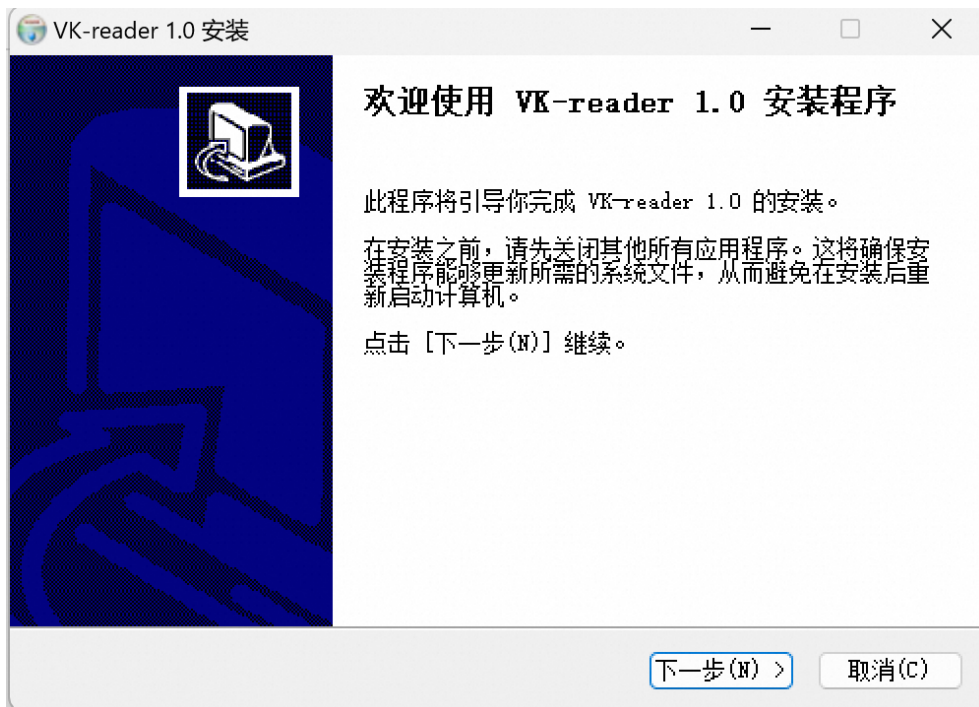


2.

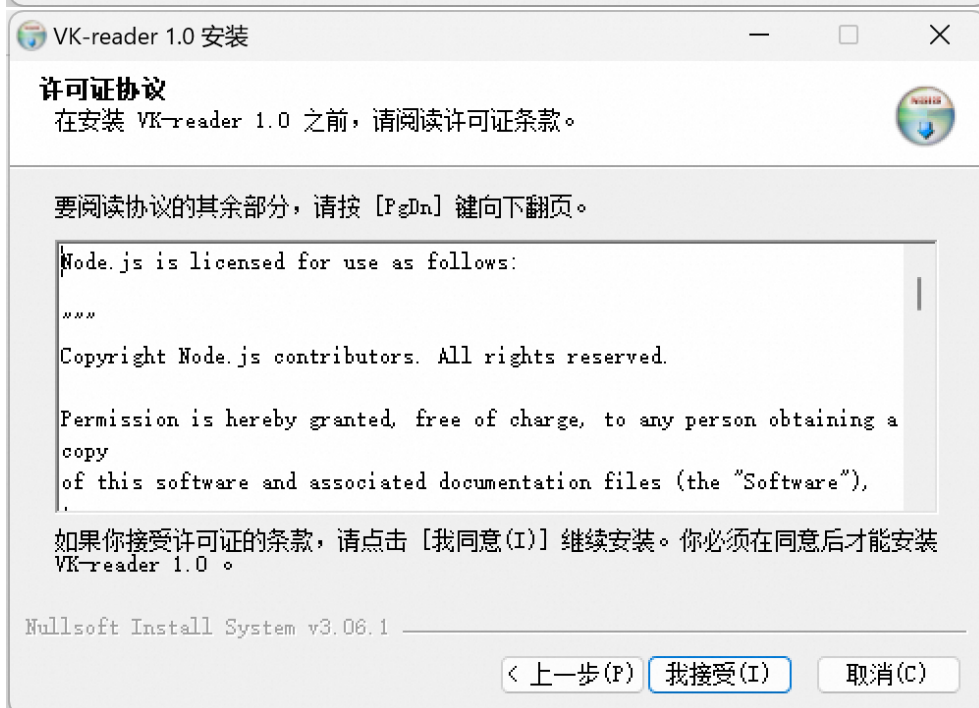


3.

4. 选择需要将程序安装的目录, 并点击安装

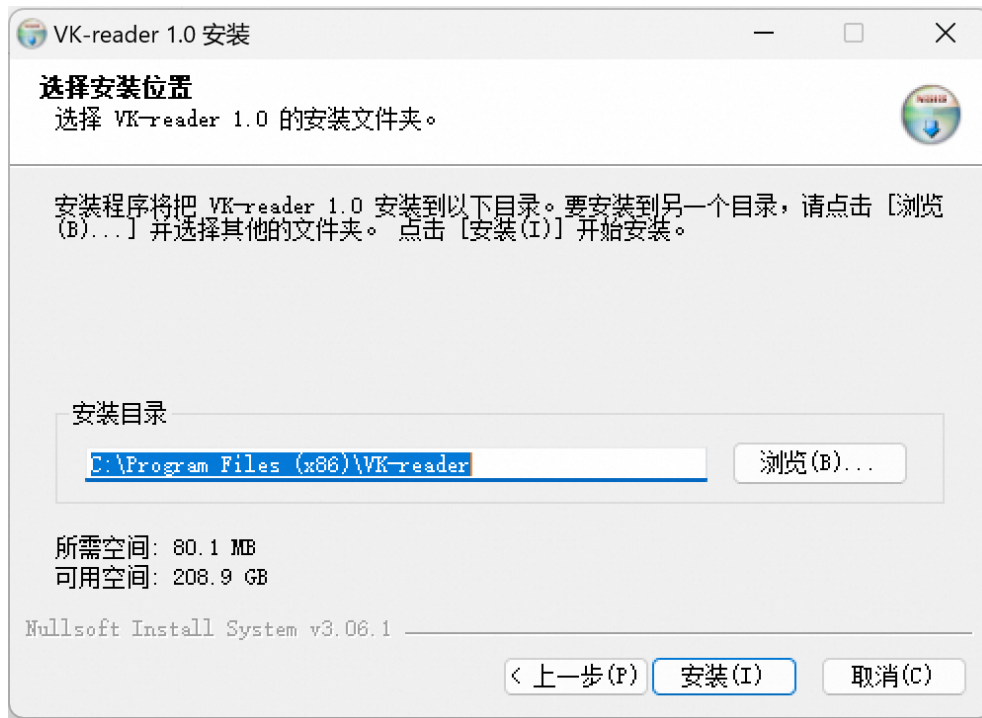

5. 等待安装结束，期间请不要进行任何操作。安装完成后会自动打开浏览器。

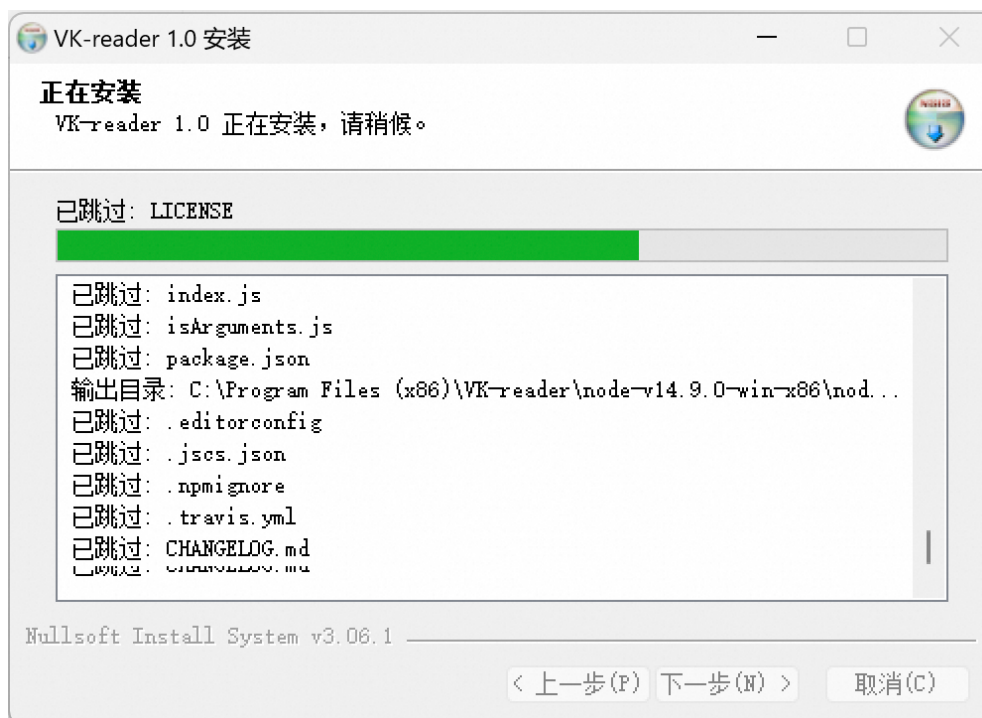

6. 等待自动打开浏览器

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
{
  "grow": 0.25,
  "wait": 1,
  "maxrestarts": 3,
  "abortonerror": "n",
  "stopparentfirst": undefined,
},
description: '四川卫康科技有限公司',
logpath: null,
env: { name: 'NODE_SKIP_PLATFORM_CHECK', value: 1 },
execPath: 'C:\\Program Files (x86)\\VK-reader\\node-v14.9.0-win-x86\\node.exe',
logOnAs: {
  account: null,
  password: null,
  domain: 'LOOK-WIN',
  mungeCredentialsAfterInstall: true
},
workingdirectory: 'C:\\Program Files (x86)\\VK-reader',
stopparentfirst: undefined,
stoptimeout: 30,
logmode: 'rotate',
logging: undefined,
allowServiceLogon: undefined
}
```

7. 安装完成后，浏览器打开如何页面，若未能自动打开浏览器，可手动输入“http://127.0.0.1:4000” 手动进入配置页面。

配置

* 数据保存路径:

./data

* 检测频率:

10

秒

* 日志等级:

info

设备:

127.0.0.1

80

×

+ 添加设备

保存

修改配置

数据保存路径：

默认为软件安装目录下 data 文件夹。可以更具需求修改地址，例如 "C:\Users\myData"

检测频率： 默认 10 秒查询一次

日志等级： 默认 "info"， 开发人员使用

设备：

支持填写多个设备，填写设备 ip 以端口号

修改完成后，点击保存，弹出提示 "配置修改成功，重启电脑后生效！"。

重新启动电脑，查看数据。